

01

SERTIFIKUOTA
KOMPANIJA

Neinvaziniai estetiniai
gydymo būdai,
stebinantys klinikiniais
rezultatais.



biotec italia
Medical

NAUJOS KARTOS
NEINVAZINĖ ULTRAGARSO
PROCEDŪRA




hifu-finesse

biotec italia


hifu-finesse

išskirtinis dizainas ir technologija

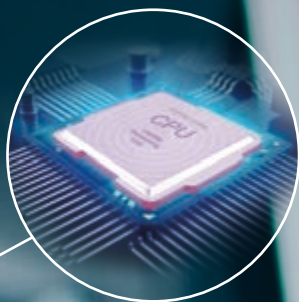

UNIKALIOS INOVACIJOS INOVACIJOS

„Biotec Italia“ kuria naujos kartos aparatus, išsiskiriančius naujausia technologine ir programine įranga bei dizainu. Kompetetingų mokslininkų komanda technologijų ir medicinos atstovams siūlo naujos kartos išmanių sprendimus, leidžiančius nuolat atnaujinti sistemą, kad būtų išvengta aparatų technologinio senėjimo. Didžiausia galia ir našumas, visada garantuotas.

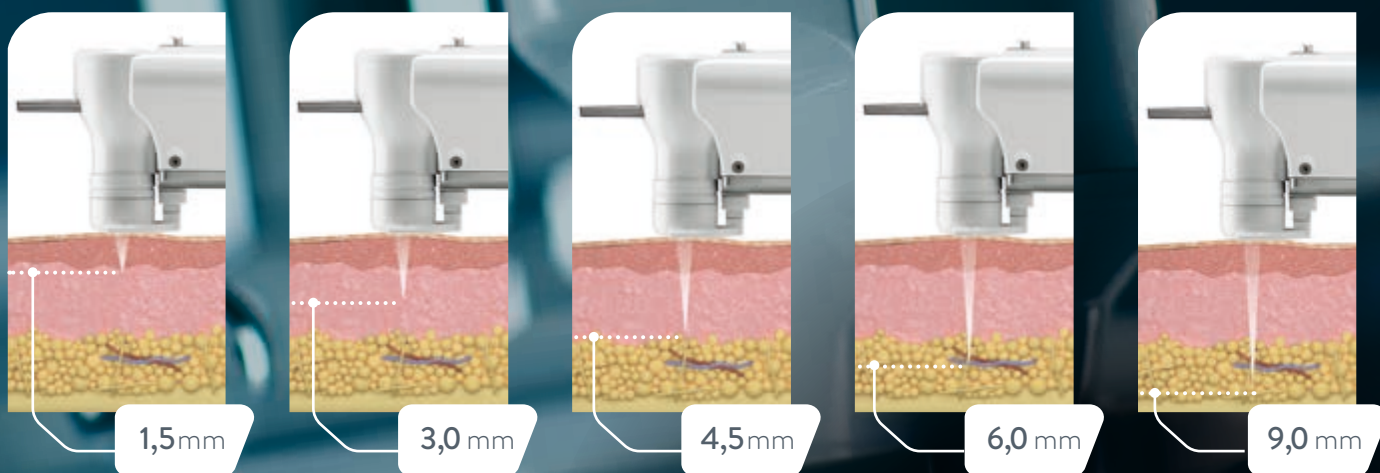

Centrinė mikroabliacija perduodama per epidermį ir sutelkiama norimuose odos sluoksniuose.

REFLEX® DirectDrive greitasis judėjimas.

CENTRUOTAS DAVIKLIS



Taip išvengiama per didelio karščio odos paviršiuje, kurį sukelia ultragarso energijos koncentracija pjezoelektriko centre ir yra užtikrinama saugesnė ir tikslesnė procedūra.



PRIVALOMAS SKANAVIMAS

Robotinė technologija leidžia pasirinkti ilgį ir impulsų užlaikymą. Lengviau kontroliuoti energijos tankį ir srautą į audinį.

REFLEX® Robot Technology

IŠSKIRTINIS DIZAINAS



Dėl plono kasetės dizaino sukuriamas didelis matymo laukas. Dėl to galima lengviau ir tiksliau veikti visus odos kontūrus.



ITIN GREITAS IMPULSAS

Robotinė technologija leidžia pasirinkti ilgį iki 30 mm ir impulsų užlaikymą tarp koaguliacijos taškų, kad būtų galima procedūrą atlikti itin greitai.

ESTETINIS ODOS SKULPAVIMAS

Estetinis veido ir kūno gydymas gali būti taikomas pagal kiekvieno odos tipo unikalias fizines savybes, reguliuojant skleidžiamo ultragarso energiją ir gylį. Pasirinkimai skiriasi savo geometrine forma ir bangos ilgio konfigūracijomis. Procedūros metu tiekiamos energijos gylis ir kiekis gali būti keičiami, norint pasiekti norimą efektą tikslinio audinio sluoksnyje. Veido antgaliai naudojami 1,5, 3,0 ir 4,5 mm. Jie gali būti naudojami kartu, kad būtų galima pasiekti epidermą (1,5 mm), dermą (3,0 mm) arba poodinius audinius (4,5 mm), įskaitant SMAS sluoksnį. Nepageidaujamiems riebalams gydyti FINESSE naudoja 2 gylius - nuo 6 iki 9 mm. Didelės energijos ultragarsu makroenergija patenka į poodinius riebalus ir selektyviai naikina riebalų ląsteles.

HIPERHIDROZĖ

HIFU siūlo minimaliai invazinį gydymo būdą žmonėms kenčiantiems nuo hiperhidrozės. Skleidžiamas fokusuotas ultragarsas, veiksmingai pažeidžia prakaito liaukas, nepaveikdamas odos paviršiaus. Kadangi prakaito liaukos neturi galimybių regeneruoti, šis poveikis bus ilgalaikis.

Itin našios ir saugios procedūros.

ACE® Didelio efektyvumo dinaminis vėsinimas.

VĖSINIMAS VANDENIU

Aktyvi skysčių cirkuliacija užtikrina daviklio stabilumą. Skystis cirkuliuoja daviklio antgalyje ir grįžta į aparato rezervuarą, kuriame ištraukiama šiluma.

ILGAS TARNAVIMO LAIKAS

ACE Technologija garantuoja daviklio šiluminį stabilumą, padidina vibracijos efektyvumą, sumažina šiluminio smūgio sukeltus gedimus ir prailgina kasetės tarnavimo laiką iki 20.000 linijų.



DIDESNĖ SAUGA

ACE Technologija pagerina HIFU procedūrų saugumą, atvėsinama daviklio adapterį besiliečiantį su oda. Tai sumažina skausmą ir šalutinio poveikio tikimybę.

ACE®
Active Cooling
Emission

Indikacijos

MEDICININĖS

- Hiperhidrozė.

NEMEDICININĖS

- Veido odos stangrinimas.
- Veido raukšlės.
- Žandikaulio linijos ryškinimas.
- Kūno kontūravimas.
- Dvigubo smakro naikinimas.
- Aknės randų gydymas.



Prieš



Po 90 dienų / 1 procedūra



Prieš

Po 1 procedūros



Prieš

po 60 dienų / 1 procedūra



Prieš

Po 60 dienų / 1 procedūra



Prieš

po 60 dienų / 2 procedūros



Prieš

Po 1 procedūros



Prieš

po 90 dienų / 2 procedūros

biotec italia

hifu-finesse

Įsiskverbia į sluoksnius, kuriuos
anksčiau buvo galima pasiekti tik
chirurginiu būdu.

- **REFLEX®** Robotinė technologija
- **ACE®** Aktyvus vėsinimas
- **CENTERLESS TECHNOLOGY:** Selektyvus terminis efektas

VIDEO
TUTORIAL

The design of the machine may slightly differ from the image,
while keeping the described functions unchanged.

hifu-finesse

BY-MED. HIFU REL. 1. 2021

TECHNICAL DATA

VOLTAGE SUPPLY	230 Vac - 50/60 Hz
MAX POWER	200 VA
CLASS AND TYPE	I - BF
FUSES	2 x F2A 250V
DIMENSIONS	700 x 500 x 1300 mm
WEIGHT	45 kg
PULSE DURATION	100 ms
PULSE EMISSION STEP	1 ÷ 5 mm
SCANNING LENGHT	15 ÷ 40 mm

CARTRIDGE 1,5 mm

FOCAL DEPHT	1,5 mm
MAX POWER	6 W
APERTURE DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	4 MHz

CARTRIDGE 3 mm

FOCAL DEPHT	3,0 mm
MAX POWER	6 W
APERTURE DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	4 MHz

CARTRIDGE 4,5 mm

FOCAL DEPHT	4,5 mm
MAX POWER	10 W
APERTURE DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	4 MHz

CARTRIDGE 6 mm

FOCAL DEPHT	6,0 mm
MAX POWER	23 W
APERTURE DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	2 MHz

CARTRIDGE 9 mm

FOCAL DEPHT	9,0 mm
MAX POWER	23 W
APERTURE DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	2 MHz

FACE Cartridges



1,5 mm

3 mm


4,5 mm

BODY Cartridges



6 mm

9 mm

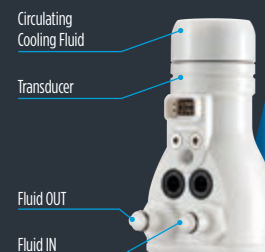

PATIKIMA KOMPANIJA

Nuo 1993 m. „Biotec Italia“ turinti tvirtą technologinę patirtį, stiprių mokslininkų komandą ir natūralų polinkį kurti estetiškai gerovę. Kurti, gaminti ir tiekti į rinką aukščiausio lygio estetiškos medicinos technologinius prietaisus, gaminti kokybišką kosmetiką - visa tai yra „Biotec Italia“ misija. Dueville (VI) ir Londone įsikūrusi „Biotec Italia“ yra viena iš pagrindinių medicininės ir estetiškos grožio industrijos lyderių.

100% PAGAMINTA ITALIJOJE

Visas gamybos procesas, nuo projekto iki aparato surinkimo ir kokybės patikrinimo, yra visiškai itališkas. Siekdama garantuoti aukščiausio lygio servisą, „Biotec Italia“ pasižymi operatyviu garantinio aptarnavimo punktualumu ir kompetencija. „Biotec Italia Academy“ – tai profesionalių specialistų, mokslo srities lyderių ir „Biotec“ klientų pardavimo ir rinkodaros komanda.

NUO PROJEKTO IKI REALIZACIJOS

Nuo dizaino projekto iki gamybos ir pardavimo. Puikus mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius, novatoriška bandymų kamera ir efektyvios gamybos bei logistikos priemonės yra būtinos plėtojant veiklos esmę: mokslinius tyrimus, naujoves ir pritaikymą. Visa tai valdo ir kontroliuoja grupė Italijos būstinėje - Duevilyje (VI).

SERTIFIKATAI IR GARANTIJOS

„Biotec Italia“ pasiekė dvigubą sertifikavimo pripažinimą: tiek autoritetinę ISO 9001, garantuojantį visišką įmonės laikymąsi griežtų Italijoje galiojančių taisyklių, tiek „CE“ ženklą, patvirtinantį jos aparatų technologinį efektyvumą.



biotec italia
Medical

BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)
VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32

W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM

YouTube Instagram Facebook LinkedIn



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



CE 1370

BIOTEC ITALIA
MEDICAL
E UNA
DIVISIONE DI



biotec italia